

ORO-BRUSH – SONIC DANTŲ ŠEPETĖLIS BALTAS/ JUODAS/ ŽALIAS

ORO-BRUSH ELEKTRINIS DANTŲ ŠEPETĖLIS SVARBIOS APSAUGOS PRIEMONĖS


Prieš naudodami prietaisą perskaitykite visas instrukcijas
ĮSPĖJIMAS

- Kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio ar susižalojimo pavojų:
- Nepalikite prietaiso, kai jis įjungtas. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai nenaudojate ir prieš atlikdami techninę priežiūrą
- Neleiskite naudoti kaip žaislo. Būtinai didelis dėmesys, kai naudojasi vaikai arba jie yra šalia jų
- Naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame vadove. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus
- Nenaudokite su pažeistu laidu arba kištuku. Jei prietaisas neveikia, nes buvo numestas, sugadintas, paliktas lauke arba įmestas į vandenį, grąžinkite jį į techninės priežiūros centrą.
- Netraukite ir neneškite už laido, nenaudokite laido kaip rankenos, neuždarykite durelių ant laido ir netraukite laido aplink aštrius kraštus ar kampus.
- Neleiskite prietaiso per laidą. Laidus laikykite toliau nuo įkaitusių paviršių
- Neištraukite kištuko traukdami už laido. Norėdami atjungti kištuką, imkite už kištuko, o ne už laido
- Nelieskite kištuko ar prietaiso šlapiomis rankomis
- Prieš atjungdami iš elektros tinklo, išjunkite visus valdiklius
- Niekada neuždenkite gaminio oro angų ir nedėkite jo ant minkšto paviršiaus, pvz., lovos ar sofos, kur oro angos gali būti užblokuotos. Saugokite, kad oro angose nebūtų pūkelių, plaukų ir panašių dalykų.
- Niekada nenaudokite, kai miegate arba esate mieguisti
- Niekada nemeskite ir neįkiškite jokių daiktų į jokią angą ar žarną
- Nenaudokite lauke ir nedirbkite ten, kur naudojami aerosoliniai produktai arba kur įvedamas deguonis
- Prijunkite šį gaminį tik prie tinkamai įžeminto lizdo. Žr. gręžimo instrukcijas
- Prieš pildami ištraukite šį gaminį. Neperpildykite.

DVIEJŲ MINUČIŲ AUTOMATINIS LAIKMATIS

- ORO-BRUSH sukurtas taip, kad pasiektų patikrintą ir geriausią valymo laiką. Po dviejų minučių valymo prietaisas automatiškai sustoja.

KOMPONENTŲ SĄRAŠAS

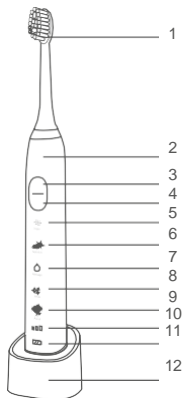

1. Šepetėlio galvutė
2. Dantų šepetėlio rankena
3. Maitinimo įjungimas/išjungimas
4. Valymo stiprumas, mygtukas-Valymo režimo mygtukas
5. Valymas
6. Jautrus
7. Masažas
8. Balinimas
9. Poliravimas
10. Šepetėlio stiprumo indikatorius
11. Įkrovimo indikatorius
12. Įkrovimo stovas

ĮKROVIMAS

- Pirmą kartą pilnai įkrauti reikia 16 valandų, o vėliau – 12 valandų. Tai leidžia valyti šepetėliu 30 dienų. Maitinimo indikatorius užsidega raudonai, o mirksintis reiškia, kad akumuliatoriaus

įkrova yra maža. Indikatoriaus lemputė nuolat mirksi raudonai, kai kraunamas, ir visiškai įkrautas, kai indikatorius tampa žalias.

- Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kad sutaupytumėte energiją, arba palikite jį ir šepetėlį laikykite ant įkrovimo pagrindo, nėra pavojaus, kad akumuliatorius perkraus.
- Jei nenaudojate ilgą laiką ir įkraunate, maitinimo indikatorius neužsidega iš karto, o tai yra normalu. Po 30 minučių išankstinio įkrovimo užsidegs maitinimo indikatorius.

VALYMO REŽIMAI

The ORO-BRUSH offers 15 different brushing modes for varying oral care needs: ORO-BRUSH siūlo 15 skirtingų valymo režimų įvairiems burnos priežiūros poreikiams:

- Valykite 3 skirtingų stiprumų šepetėliais – šepetėlio galvutė sukasi dideliu dažniu, pašalina dantų akmenis ir bakterijas ant dantų.
- Jautrus su 3 skirtingo stiprumo šepetėliais – jautriems dantims ir dantenoms, valykite dantis švelniai.
- Masažas naudojant 3 skirtingus valymo stiprumus – valykite dantis itin švelniai.
- Balinimas su 3 skirtingais valymo stiprumais – nuolatinis valymo ir poliravimo režimo perjungimas ir dantų balinimas.
- Poliravimas naudojant 3 skirtingus valymo stiprumus – didelio stiprumo ir aukšto dažnio, poliruoti ir šviesinti dantis.

KAIP PERJUNKTI ŠEPETĖLIO REŽIMUS

- Maitinimo įjungimo/išjungimo ir valymo režimo mygtukas. Laikykite nuspaudę šį mygtuką per 5 sekundes, veikimo seka bus įjungta, valymo režimas, jautrus režimas, masažo režimas, baltas režimas, poliravimo režimas, baigiamas maitinimas. Paspauskite mygtuką 5 sekundes, jis išsijungs.
- Vieną kartą paspaudus valymo režimo mygtuką, ORO-BRUSH automatiškai įsijungia valymo režimu
- Norėdami perjungti iš vieno režimo į kitą, paspauskite valymo režimo mygtuką antrą kartą
- Kai paspausite valymo režimo mygtuką, užsidegs valymo režimo indikatorius, nurodantis pasirinktą darbo režimą

IŠMETIMAS

- Svarbu: nevalykite įkrovimo įrenginio po tekančiu vandeniu ir nenardinkite į vandenį. Įkrovimo stotelę pastatykite sausoje ir saugioje vietoje
- Šiame gaminyje yra įkraunama baterija. Aplinkos apsaugos sumetimais, pasibaigus jo naudojimui laikui, neišmeskite gaminio su



buitinėmis atliekomis. Vienkartines galima atiduoti atitinkamuose surinkimo punktuose, esančiuose jūsų šalyje

Platintojas Lietuvoje

MB Euromedika

T.Ševčenkos 16, korp.2

LT-03111 Vilnius, Lietuva

Tel. +370 5 2151418

www.diaagnostikostestai.lt

OROMED SZYMANEK SP. K.

ul. Ptasia 10

60-319 Poznań

Polska, Europa

www.ored.pl

Wersja: 2_03.2022 r.

